

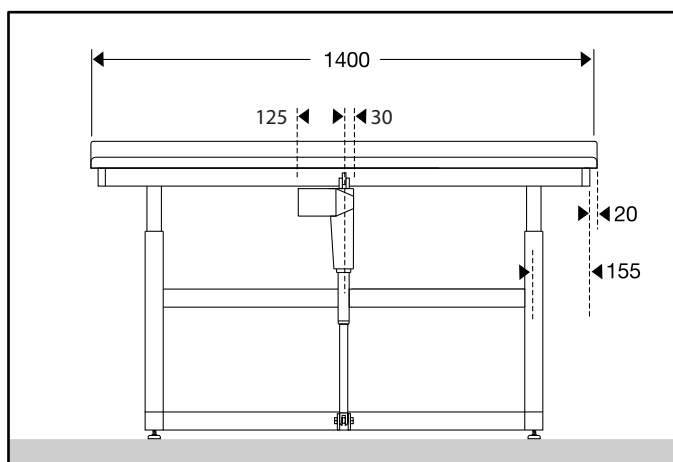


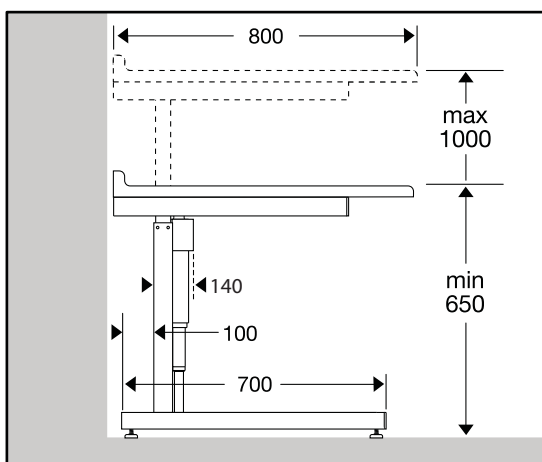

Ret til ændringer forbeholdes · Recht auf Änderungen sind vorbehalten · Subject to alteration without further notice
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de nos produits sans préavis.
Wijzigingen voorbehouden · Salvo variaciones · Salvo variazioni · Rätten til ändringar förbehålles · Vi förbeholder oss rett til endringer
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään · Rettur til breytinga áskilinn · Reservado o direito de fazer modificações sem prévio
Επιφύλασσόμεθα για εκτηνωτικά γόηη, μικές τεχνικές αλλαγές και παρεκκλίσεις μοντέλων.

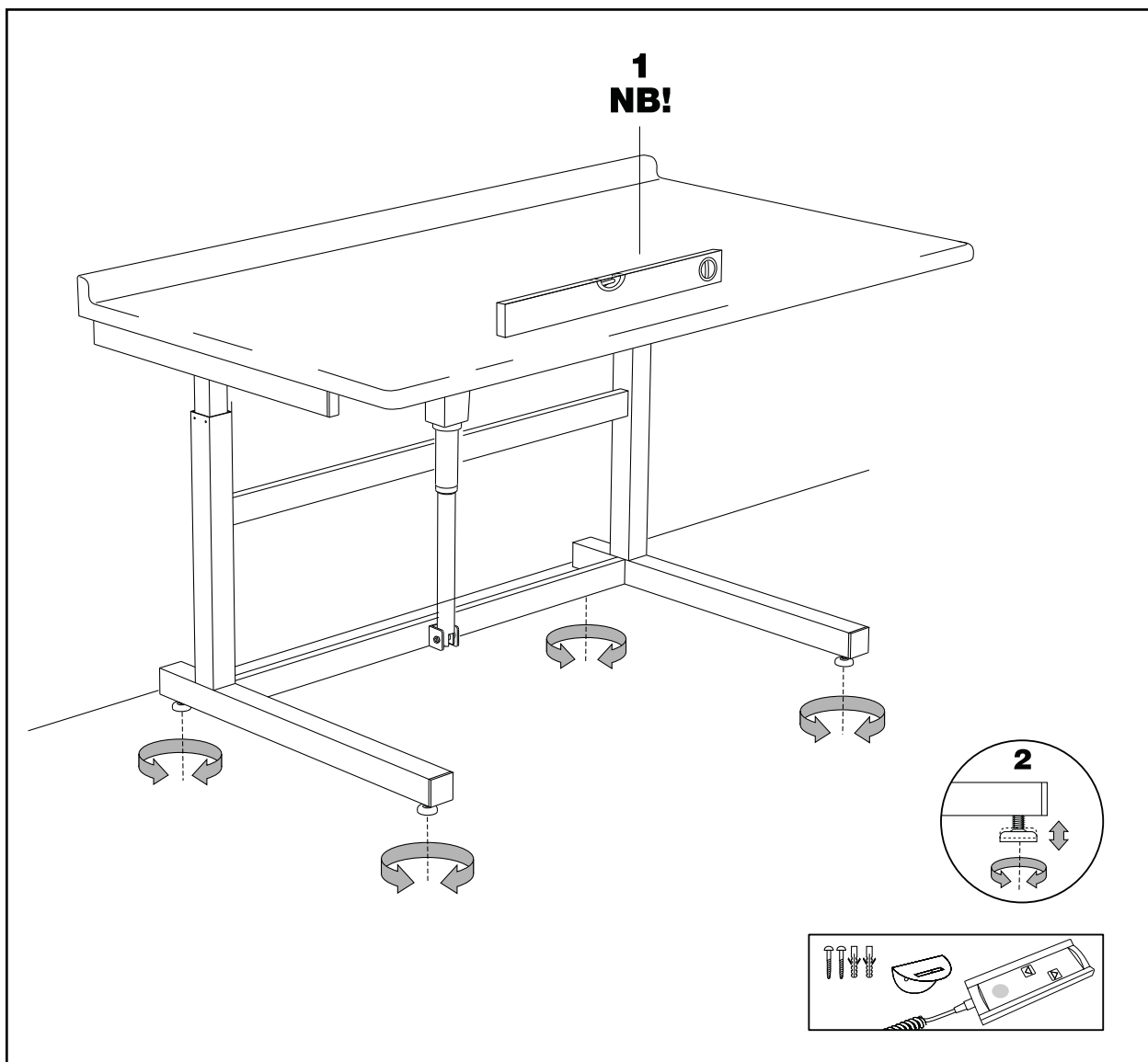

keep living

Fig. 1

Styreboks m/transformer 230V, 50/60HZ

Steuergerät mit Transformator 230V, 50/60 HZ

Control box with transformer 230V, 50/60HZ

Boîtier de commande avec transformateur 230V, 50/60/ Hz

Regeldoos met transformator 230V, 50/60 HZ

Caja de control con transformador 230V, 50/60 HZ

Scatola comandi con trasformatore 230V, 50/60 HZ

Styrenhet med transformator 230V, 50/60 Hz


Styreboks m/transformator 230V, 50/60 Hz





Muuntajalla varustettu ohjauskaappi 230V, 50/60 Hz

Stjórnkassi me spennubreyti, 230V, 50/60Hz.

Caixa de controlo con transformador 230V, 50/60 HZ

Κιβώτιο ελέγχου με μετασχηματιστή 230V, 50/60 Hz

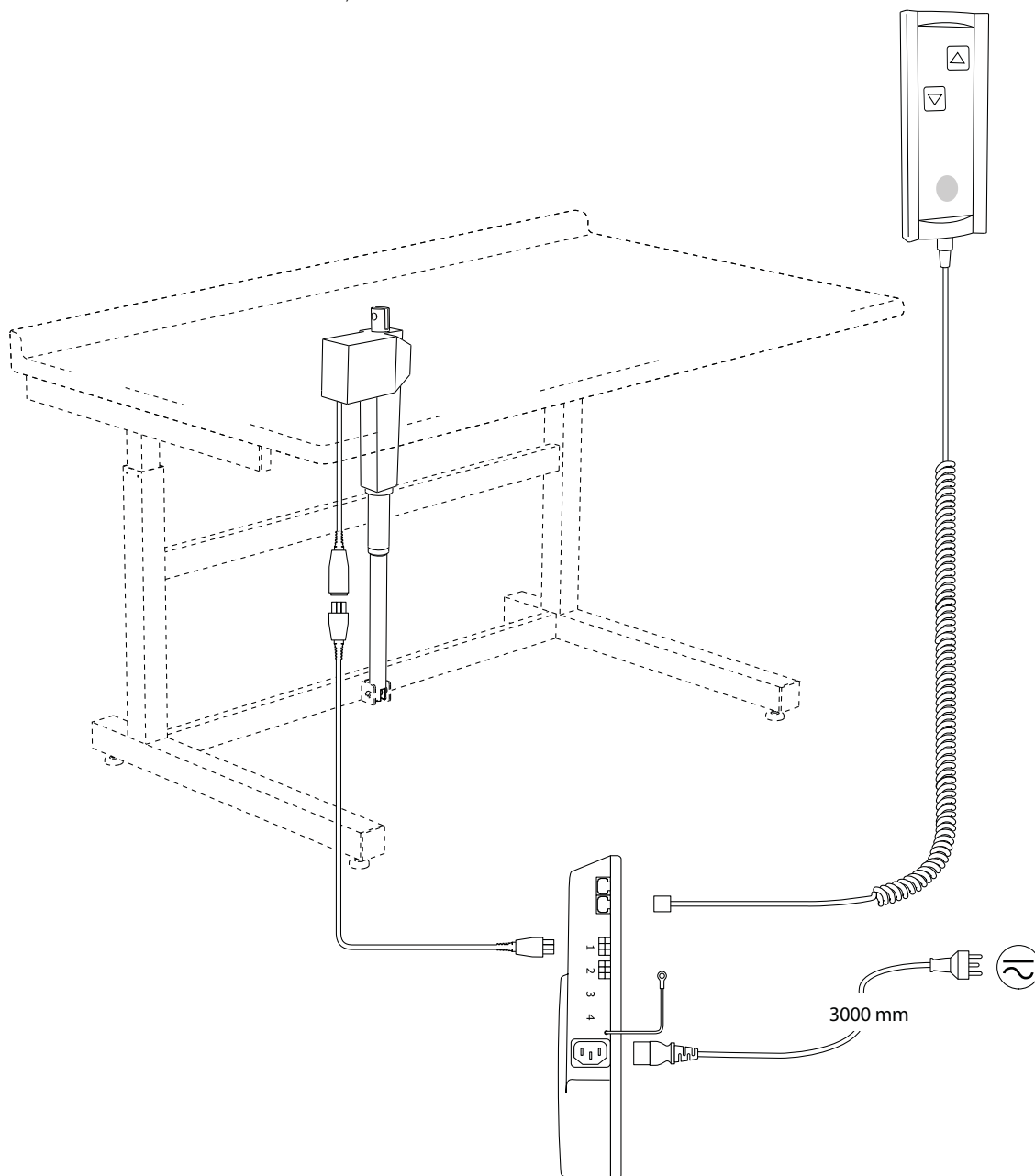

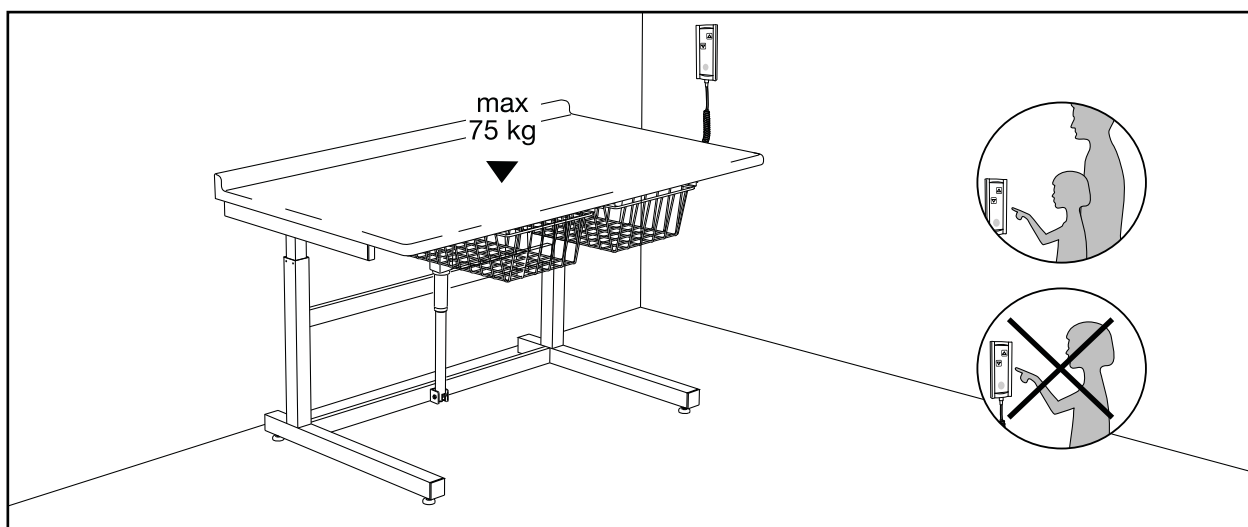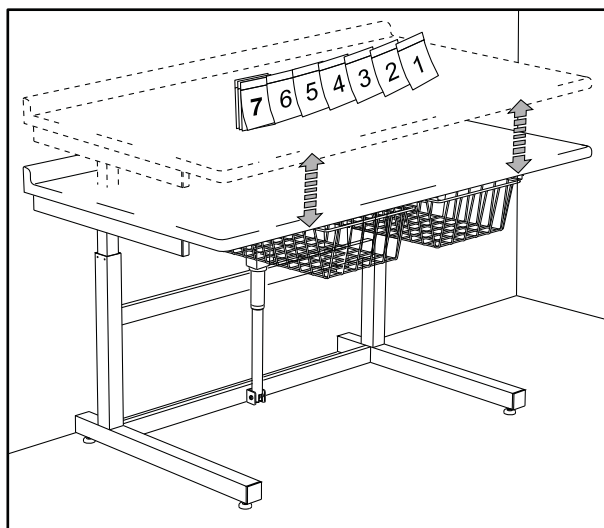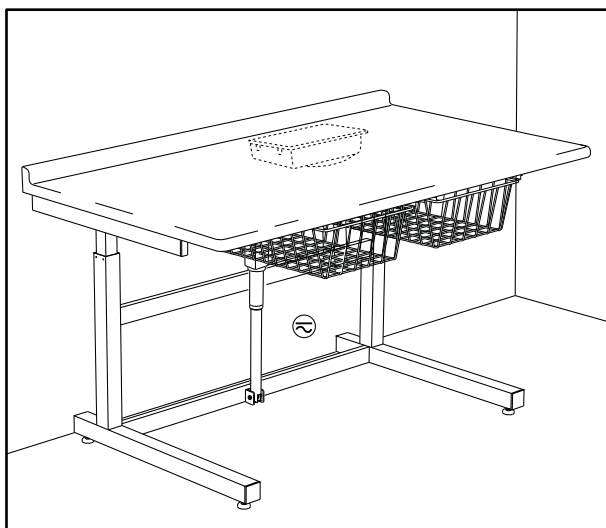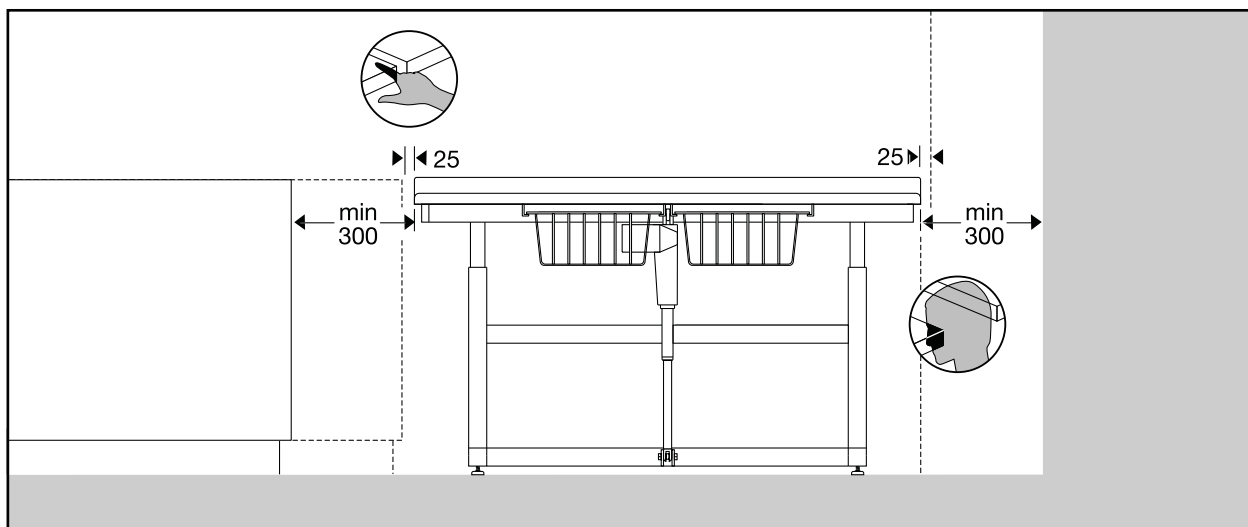

Ret til ændringer forbeholdes · Recht auf Änderungen sind vorbehalten · Subject to alteration without further notice
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de nos produits sans préavis.
Wijzigingen voorbehouden · Salvo variaciones · Salvo variazioni · Rätten til ändringar förbehålles · Vi förbeholder oss rett til endringer
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätään · Rettur til breytinga áskilinn · Reservado o direito de fazer modificações sem prévio
Επιφύλασσόμεθα για εκτηνωτικά γόηη, μικές τεχνικές αλλαγές και παρεκκλίσεις μοντέλων.



keep living

(DK) Monteringsvejledning

Motor, håndbetjening og netledning tilslutning som vist på fig. 1, side 2

Køre bordstellet ikke: kontrollér om strømmen er tilsluttet korrekt. Styreboksen med indbygget transformer skal tilsluttes 230 V. El-installationen skal foretages af autoriseret el-installatør og skal følge gældende national lovgivning.

(D) Montageanleitung

Motor, Handbedienung und Elektroanschluß wie bei Fig. 1 gezeigt. Seite 2

Sollte sich die Rahme für Tischplatte keine Funktion zeigen: Bitte kontrolliere, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist. Das Steuergerät mit eingebautem Transformator muß einen Stromanschluß von 230V angeschlossen werden. Die Elektroinstallation muß vom zugelassenen. Elektroinstallateur vorgenommen werden und soll geltende nationale Gesetze folgen.

(GB) Assembly Instruction

Motor, hand-operator and connection see Fig. 1., page 2.

If the worktop frame does not function: check that the current is correctly switched. Connect control box (transformer is included) to 230V. Electrical installations are to be carried out by a qualified electrician according to the ruling national legislation.

(F) Notice de montage

Raccorder le moteur, la commande manuelle et le câble secteur comme le montre la Fig. 1. page 2.

Si le cadre pour plan de travail ne fonctionne pas, vérifier que l'alimentation en courant est correcte. Le boîtier de commande avec transformateur intégré doit être raccordé à une alimentation 230 V. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien agréé, conformément à la législation nationale en vigueur.

(NL) Montageanleitung

Motor, handbediening en aansluiting van de stroomleiding zoals aangegeven in fig. 1. pagina 2.

Indien het Tafelonderstel niet werkt: controleer of de stroom correct aangesloten is. De regeldoos met ingebouwde transformator moet op 230 V aangesloten worden. De elektrische installatie dient door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf uitgevoerd te worden volgens de geldende richtlijnen.

(E) Instrucciones de montaje

Motor, operador manual y conexión, ver Fig. 1., página 2.

Si la mesa no funciona correctamente: compruebe que se ha conectado adecuadamente a la toma de corriente. Conecte la caja de control (se incluye un transformador) a 230 V. La instalación eléctrica deberá ser realizada por un electricista profesional autorizado y seguir la legislación nacional vigente.

(I) Istruzioni di montaggio

Motore, comando manuale e connessioni, vedi Fig. 1. pagina 2.

In caso di mancato funzionamento: controllare che la corrente sia inserita. Collegare la scatola di comando (trasformatore in dotazione) alla rete da 230 V. L'impianto elettrico dovranno essere eseguite da personale autorizzato ed in conformità alle norme vigenti.



keep living



(S) Monteringsanvisning

Motor, handmanövererhet och nättledning ansluts i enlighet med fig. 1, side 2.

Om bordsstommet inte fungerar: kontrollera att strömmen är korrekt ansluten. Styrenheten med inbyggd transformator skall anslutas till 230 V. Elinstallationen ska utföras av en behöriginstallatör i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

(N) Monteringsveiledning

Motor, håndbetjening og nettstrømlledning tilkobles som vist på fig.1, side 2.

Dersom understellet til bordet ikke går: Kontroller om strømmen er koblet til på riktig måte. Styreboksen med innebygd transformator skal tilkobles 230V. Installasjonen av strøm skal foretas av autorisert elektroinstallatør og være i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning.

(FIN) Asennusohje

Moottori, käsiohjain ja verkkokaapeli asennetaan kuvassa 1 sivulla 2 esitetyllä tavalla.

Ellei pöytäteline toimi, tarkista, onko verkkoliitäntä tehty oikein. Ohjainkotelo muuntajineen liitetään 230 voltin verkkojännitteeseen. Valtuutetun sähköasentajan on suoritettava kaikki sähköasennukset lakisääteisten määräysten mukaisesti.

(IS) Leiðbeiningar um uppsetningu

Mótor, stjórntæki og leiðslum er komið fyrir eins og synt er á mynd 1, Síðu 2.

Ef ekki er unnt að hreyfa bekkinn ber að gæta hvort straumurinn hefur verið tengdur rétt. Stjórnkassa með innbyggðum spennubreyti skal tengja við 230 volta straum. Rafmagns uppsetningin skal gerð af löggiltum rafvirkja og vera samkvæmt landslögum.

(P) Instruções para montagem

O motor, o accionamento manual e o cabo de alimentação são ligados conforme mostrado na figura 1, página 2.

Se o suporte da mesa não se mover: Controle se está feita a ligação adequada à corrente. A caixa de controlo com transformador incorporado deve ser ligado a 230 V. A instalação eléctrica deve ser executada por electricista autorizado e deve ser feita conforme legislação nacional vigente.

(GR) Οδηγίες τοποθέτησης

Ηλεκτροκινητήρας, χειριστήριο χειρός και σύνδεση βλ. σελίδα 2.

Αν ο σκελετός τραπέζιού δεν λειτουργεί: ελέγξτε ότι υπάρχει σωστή τροφοδοσία ρεύματος. Συνδέστε το κατ'ελάχιστο (περιλαμβάνεται μετασχηματιστής) σε συνεχές ρεύμα 230V. Η σύνδεση του ρεύματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.



(DK) Vedligeholdelse, rengøring

Anvend kun alm. sæbevand (undgå slibende, ætsende og klorholdige rengøringsmidler).

(D) Reinigungs- und Gebrauchsanleitung

Nur normale Seifenlauge verwenden (keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel).

(GB) Maintenance, cleaning

Use only regular soap water (avoid cleaners which polish, corrode or contain chlorine).

(F) Entretien, nettoyage

N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire (éviter les produits de nettoyage abrasifs, corrosifs et javellisés).

(NL) Onderhoud, reiniging

Gebruik alleen normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen (geen schurende, etsende of chloorhoudende middelen).

(S) Rengöring och underhåll

Använd endast vanligt såpvatten (undvik slipande, frätande och klorhaltiga rengöringsmedel).

(E) Mantenimiento, limpieza

Utilice únicamente agua y jabón neutro (evite el uso de detergentes abrillantadores, corrosivos o que contengan clorina).

(N) Vedlikehold, rengjøring

Bruk bare vanlig såpevann (unngå slipende, etsende og klorholdige rengjøringsmidler).

(FIN) Hoito, puhdistus

Käytä vain tavallista saippuavettä (hiovia, syövyttäviä ja klooripitoisia puhdistusaineita on vältettävä).

(I) Manutenzione, pulizia

Usare solo acqua con sapone comune (evitare i detergenti contenenti agenti lucidanti, corrosivi o cloro).

(IS) Vi hald og rif

Noti a eins venjulegt sápuvatn (for ist a nota kornótt, ætandi og klórkennd vottaefni).

(P) Manutenção, limpeza

Utilize apenas água com sabão (evite produtos de limpeza que façam polir, corroer ou que contenham cloro).

(GR) Συντήρηση, καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε μόνο σαπουνόνερο (αποφύγετε καθαριστικά τα οποία γνάλιζουν, διαβρώνουν ή περιέχουν).



keep living

Telephone: +45 87 888 777
Telefax: +45 87 888 669
E-mail: mail@pressalitcare.dk
Web: www.pressalitcare.dk

Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK 8680 Ry
Denmark



DK

Overensstemmelseserklæring

Undertegnede
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
erklærer herved, at følgende produkt:
Handelsnavn: Bordstel
Model/Type: R8742000
Kategori: Hjælpe midler til
bevægelseshæmmede, klasse I som
er omfattet af denne erklæring, er
fremstillet i henhold til bestemmelserne
i henhold til bestemmelserne i direktiv:

2006/42/EF

En teknisk dokumentation holdes til
rådighed for de nationale myndigheder.

D

EG-Konformitätserklärung

Die Unterzeichnete
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
erklärt hiermit, daß das folgende
Produkt: Handelsname: Pflegeleuge
Modellnummer: R8742000
Kategorie: Badezimmerprodukte für
Behinderte, Klasse I,
das in dieser Erklärung beinhaltet ist,
gemäß der Vorschriften der Direktiven

2006/42/EG

Die technische Dokumentation muß
der nationalen Behörde zur Verfügung
stehen.

GB

EC Declaration of conformity

The undersigned
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
hereby declare that the following
product
Trade name: Nursing Bench
Model No.: R8742000
Category: Technical aids for the
disabled, class of risk I
which is comprehended by this
declaration, has been manufactured in
accordance with the Directives

2006/42/EC

Technical documentation shall be
available to the national authorities.

F

Déclaration CE de concordance

Le soussigné
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
déclare par la présente que le produit
suivant:
Nom commercial: Lits soins
No. de modèle: R8742000
Catégorie: Equipements pour
personnes handicapées classe
1, concerné par cette déclaration est
produit selon les dispositions des
directives:

2006/42/CE

Une documentation technique est
à disposition pour les autorités
nationales.

NL

EG - verklaring van overeenstemming

Ondergetekende
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
verklaart hierbij dat onderstaand
produkt
Handelsnaam: Douchebed
Modelnr.: R8742000
Kategorie: Hulpmiddelen voor
motorisch gehandicapten, klasse
I, die onder deze verklaring valt,
gefabricéerd is in overeenstemming
met de bepalingen in de Richtlijn:

2006/42/EG

Technische documentatie is
ter beschikking voor nationale
overheidsinstanties

E

Declaración de conformidad CE

El abajo firmante
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
declara por la presente que el
producto siguiente:
Nombre comercial: Camilla de aseo
Núm de modelo: R8742000
Categoría: Ayudas técnicas para
minusválidas, clase I, que está
comprendido en esta declaración,
ha sido fabricado conforme a las
disposiciones en las Directivas:

2006/42/CE

Es necesario tener documentación
técnica a la disposición de las
autoridades nacionales.

I

Dichiarazione CE di conformità

La sottoscritta
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
con la presente dichiara che il
seguito prodotto:
Nome commerciale: Lettino per
cure infermieristiche.
Modello n.: R8742000
Categoria: Ausilio per persone con
mobilità limitata, classe I, oggetto di
questa dichiarazione, è stato fabbricato
in conformità al disposto delle seguenti
direttive:

2006/42/CE

La documentazione tecnica è a
disposizione delle autorità nazionali

S

EG-försäkrän om överensstämmelse

Undertecknad
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
intyggar härmed att följande produkt:
varunamn: Duschbord
modell nr: R8742000
kategori: Hjälpmiddel för
rörelsehindrade, klass 1,
som omfattas av detta intyg,
är tillverkad i enlighet med
bestämmelserna i direktiv:

2006/42/EG

Teknisk dokumentation tillhandahålls
de nationella myndigheterna för
information

N

EF Samsvarserklæring

Undertegnede
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
erklærer herved at følgende produkt:
Handelsnavn: Pleiebenk
Modelnr.: R8742000
Kategori: Hjælpe midler til
bevægelseshæmmede, klasse I,
som omfattes af denne erklæringen,
er produceret i henhold til
bestemmelserne i
Direktiv:

2006/42/EF

Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig
for nasjonale myndigheter.

FIN

EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

Allekirjoittanut
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
vakuuttaa, että seuraava
tuotekauppanimi: Hoitoalusta
Malli: R8742000
Kategoria: Liikuntaesteisten
apuvälineet, luokka I, jota tämä
vakuutus koskee, on valmistettu
seuraavien direktiivien ohjeiden
mukaisesti:

2006/42/EY

Tekninen dokumentaatio toimitetaan
pyydettyäessä kansallisille
viranomaisille.

IS

EB-samræmisýfirtýsing

Undirritaður
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
lýsir því hér með yfir að eftirtalinn
búnaður:
Vöruheiti: Sjúkrabekkur
Gerð nr.: nr.: R8742000
Flokkur: Hjálpartæki handa
hreyfihömluðum, I. flokkur, sem fessi
yfirtýsing nær til, er framleiddur skv.
reglum í tilskipun:

2006/42/ES

Tæknifýsing er til reiðu fyrir yfirtöld.

P

Declaração CE de conformidade

Nós, os abaixo assinados,
Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
vimos por este meio declarar que o
seguinte produto:
Nome comercial: Bancada de apoio
Modelo nº: R8742000
Categoria: Dispositivo de apoio para
pessoas com mobilidade restrita,
classe I,
abrangido por esta declaração, foi
fabricado de acordo com as provisões
das seguintes directivas:

2006/42/CE

A documentação técnica está à
disposição das autoridades nacionais.

GR

**Δήλωση συμμόρφωσης
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι,**

Pressalit Care
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το
ακόλουθο προϊόν
Εμπορική ονομασία: Ο σκελετός του
τραπέζιου
Μοντέλο αq.: R8742000
Κατηγορία: Βοήθημα για άτομα με
ειδικές ανάγκες, τάξεως Ι, το οποίο
αναφέρεται στην παρούσα δήλωση,
έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις των εξής
οδηγιών:

2006/42/EK

Τα τεχνικά έντυπα είναι στη διάθεση
των εθνικών αρχών.

